

一般的名称：酸素治療フローメータ  
医療用加湿器付酸素調整器

# MB-10

特定保守管理医療機器  
管理医療機器

医療機器製造承認番号

15900BZZ00531000

当製品を医療機関等に販売・貸与する場合は、“高度管理医療機器販売業・貸与業”の業許可が必要です。  
又、修理する場合も“特定保守管理医療機器・第六区分”業許可が必要です。




## 仕様

| 適用ガス                   | 医療用酸素(O <sub>2</sub> ) |
|------------------------|------------------------|
| 一次圧力 (P <sub>1</sub> ) | 1.0~14.7MPa            |
| 二次圧力 (P <sub>2</sub> ) | 0.2MPaセット              |
| 流量計目盛                  | MB-10 1~10ℓ/min(標準状態)  |
| 加湿器容量<br>(加湿器内の水容量)    | 上限 123mmℓ<br>下限 65mmℓ  |
| 入口接続                   | W22山14袋ナット             |
| 出口接続                   | φ6ホース                  |
| 質量                     | 1300g                  |


本器は精密圧力調整器で  
医療用酸素吸入専用の調整器です。

- 調整器はテーパシート構造です。  
本器は、シート洩れ防止が施され、微量の操作でもポンベ圧が低下しても、流量変動が殆どなく安定しており、二段減圧式に近い高性能を得ることができます。

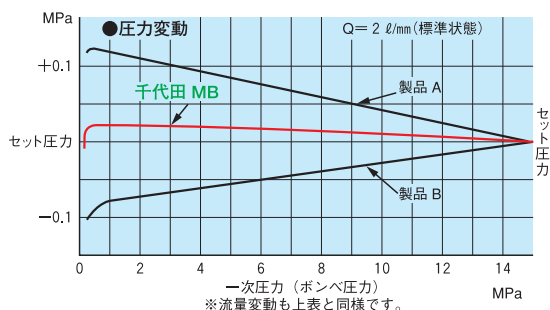


- ダイヤフラム式逃し弁の採用により、受圧面積が大きく、正確かつ確実に作動しますので、安心して使用できます。

## MBシリーズ ダイヤフラム逃し弁


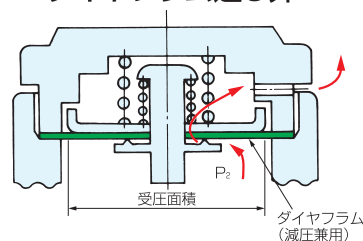


**MB-10**

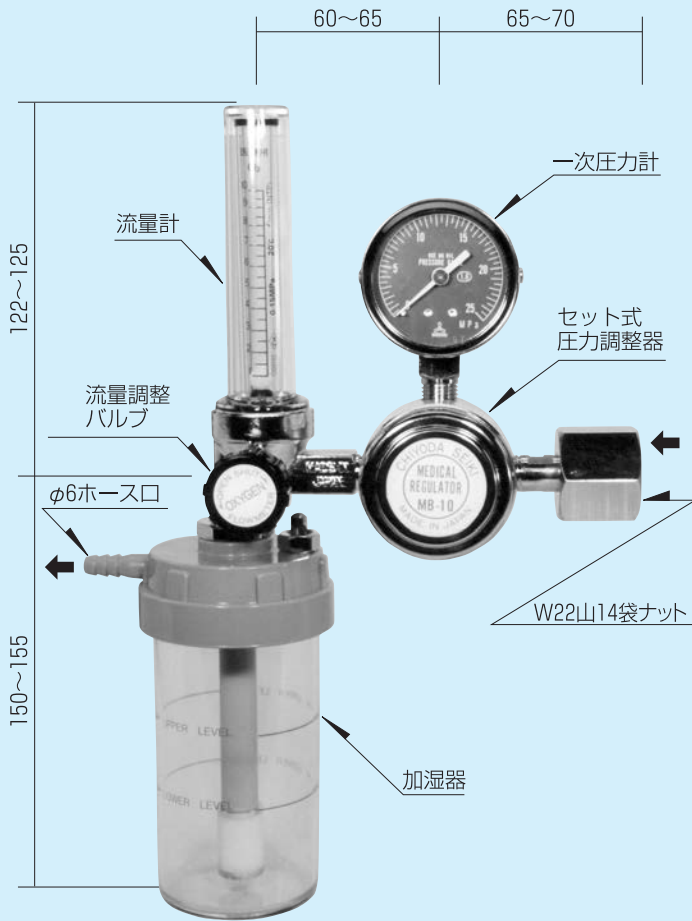

- ポンベの取付に特殊足ネジパッキン（リンパン）を採用しているため、圧力によるガス洩れの心配は殆どありません。
- 流量調整バルブはニードル構造なので、微量調整が簡単にできます。
- 使用中に万一ホースが折れ曲がって通路を塞いだとしても、本加湿器は逃し弁を内蔵しているため安心です。
- 加湿器の出口方向を自由に変えることができます。

**性能**

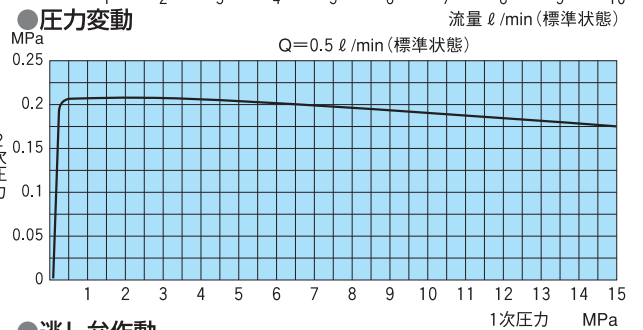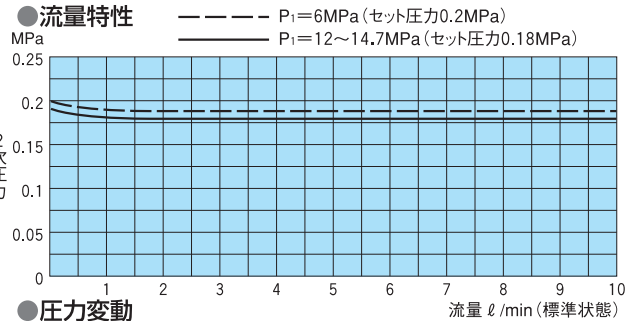


●逃し弁作動

吹出圧力 0.43MPa  
吹止圧力 0.36MPa

**加湿器 (逃し弁付)**



**流量計 (10L)**

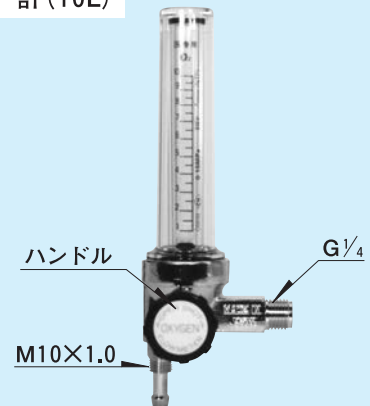

ガスシステムの総合メーカー 国際品質規格 ISO9001取得 (登録番号 00QR-285)

※改良のため予告なく仕様変更する場合があります。

**CH** 株式会社 千代田精機



本社・工場 神戸市長田区東尻池町7丁目9番21号 〒653-0022  
E-mail: info@chiyoda-seiki.co.jp  
TEL (078) 681-8844 (代表) FAX (078) 681-8849  
http://www.chiyoda-seiki.co.jp

神戸第一工場 TEL (078) 681-6321 FAX (078) 681-9835  
神戸第二工場 TEL (078) 671-0518 FAX (078) 671-0540  
支店・営業所

東京/TEL (03) 5755-5780 FAX (03) 5755-5781  
仙台/TEL (022) 390-6116 FAX (022) 390-6133  
北関東/TEL (048) 661-6981 FAX (048) 663-6951  
西神戸/TEL (079) 497-8188 FAX (079) 495-3371  
神戸/TEL (078) 681-7808 FAX (078) 681-8849  
広島/TEL (082) 232-8107 FAX (082) 292-1074

大阪/TEL (06) 6971-0500 FAX (06) 6971-0501  
北陸/TEL (076) 437-4800 FAX (076) 437-4808  
名古屋/TEL (052) 715-9787 FAX (052) 715-9789  
北九州/TEL (093) 561-7238 FAX (093) 561-7230  
熊本/TEL (096) 331-0487 FAX (096) 331-0488

代理店